

The logo for Hestia Estetik-Medikal features the word "HESTIA" in a large, bold, blue serif font. A blue swoosh underline starts under the "H" and extends under the "A". Below "HESTIA" is the text "estetik-medikal" in a smaller, blue, lowercase sans-serif font. The entire logo is set against a white background with a large blue swoosh graphic on the right side.

HESTIA
estetik-medikal

CIHAZ KATALOĐU

Antalya | İstanbul | Ankara | İzmir

www.hestiaestetik.com



Antalya | İstanbul | Ankara | İzmir

www.hestiaestetik.com



Hestia medikal çalışanları ve çözüm ortakları ile birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite standartlarında medikal estetik ürün ve cihazları sektöre sunmayı hedefliyor.

İşimize tutkuyla bağlıyız. Sunduğumuz hizmet kalitesinde geçmişin deneyimlerini sizlere aktarmaya inandık.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Estetik sektörüne sunduğumuz ürünlerin müşterilerimiz için bir değişim yaratacağına ve onlara yardımcı olacağına inanıyoruz .

İş ahlakı bize göre en öncelikli özelliğimizdir. Müşterilerimize hizmet dışında hiçbirşeye odaklanmıyor, ve en kaliteli hizmet için sürekli yenilenen, gelişen ve değişen teknolojiler ile beraber sektörel çözümler üretiyoruz.

Tüm ilişkilerimizde adilane, etik, iyi niyet anlayışıyla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ana ilkelerimizdendir.

Hestia Estetik Medikal

Antalya | İstanbul | Ankara | İzmir

www.hestiaestetik.com

MEDİKAL CİHAZLAR

SAYFA

OMNILUX	:	1-8
CICU F	:	9
CICU VR	:	10
ULTHERA MD	:	11
CRYO MICRO RF	:	12
Q SWITCH PICOSECOND	:	13
VARISON	:	14
DIONE DIODE LASER	:	15

IPL CİHAZLAR

ALEX PRO ÇİFT BUZ BAŞLIK	:	16
ALEX PRO TEK BUZ BAŞLIK	:	17
ALEX PRO SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ VE BUZ BAŞLIK	:	18

ZAYIFLAMA

MYSTIC DAWN +++ CYROLIPOLYSIS	:	19
KAVİTASYON MYSTIC DAWN	:	20
G-5 VİBRASYONLU MASAJ	:	21

CİLT BAKIMI

HESTIA BEAUTY	:	22
AQUA MAGIC	:	23



OMNILUX



Işık Tedavisinde Liderler

Omnilux™, küresel medikal pazarda yenilikçi, etkili ve uygun fiyatlı çözümler sunan ve sadece estetik tedaviler ışığında dünya lideri olan LED Light Therapy'de Gold Standard ve pazar lideridir.

1998 yılında Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından finanse edilen fizikçi Doktor Colin Whitehurst tarafından kurulan Omnilux, fotodinamik terapide devrim yarattı, laboratuara ve kliniklere taşıdı. Doctor Whitehurst, 40'ın üzerinde klinik çalışma ile 15 yılı aşkın süredir LED sistemlerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir.



OMNILUX™
Işık Tedavisinde Liderler

**Cilt Yaşlanmasının Belirtilerini Tersine
Çevirme**
Cilt Gençleştirme Bilimi

OMNILUX



Omnilux revive™

Omnilux revive™, birincil cilt gençleştirme için tek başına kullanılabilir. Cilt daha az ince çizgiyle daha net görünür ve nemlendirilir.



Omnilux plus™

Yara iyileşmesi, ağrı yönetimi, sedef hastalığı ve periorbital kırışıklıkların azaltılması için,
Omnilux plus™



Omnilux blue™

Hafif ila orta dereceli akne vulgaris için, **Omnilux blue™**

O nasıl çalışır ?



Yaşlandıkça, cildin destekleyici yapılarını üreten hücreler yavaşlamaya başlar. Güneş ışınlarından kaynaklanan çevresel zararlar bu süreci hızlandırır cilde kolajen ve elastin üreten hücrelere zarar veren serbest radikaller üretir.

Omnilux™ kombinasyonlu ışık terapisi, cildin destekleyici yapılarının sentez ve onarımından sorumlu olan ve ince çizgilerin yumuşatılmasına ve gelişmiş cilt tonuna yol açan spesifik hücreleri hedefler.

Kimler yararlanabilir ?

Bu tedavi, her yaşta erkek ve kadın ve cilt tipleri için faydalı ve etkilidir.

Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika sürecektir. Tedavi sırasında ve sonrasında rahatlama ve iyi olma hissi yaşayacaksınız. 20 dakikalık seansınızı takiben, normal rutininize geri dönebilirsiniz.



Bir dizi tedaviden ne sonuç beklenebilir ?



Göreceğiniz ilk etkiler daha net, daha parlak ve pürüzsüz bir cilt. Tedavilerden sonra ton, netlik ve dokuda bir iyileşme fark etmeye başlayacaksınız. Çalışmalar, deneklerin% 80'inden fazlasının ince çizgileri yumuşattığını ve% 75'inin cilt yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğünde iyileşme rapor ettiğini göstermiştir.

Etkiler ne kadar sürer ?

Etkilerin kısa ömürlü olduğu diğer tedavilerin aksine, **OMNILUX™** Kombine Işık Terapisi cildi gençleştiren ve onaran doğal hücresel süreçleri uyandır. Böylece, **OMNILUX™** ile gördüğünüz sonuçlar, ışık tedavisinden 4 ila 6 ay sonra iyileşmeye devam ediyor.

Kaç tedaviye ihtiyacım olacak? Bu sizin bireysel tedaviye bağlı olarak değişir, ancak 9 **OMNILUX™** seansı birlikte (haftada bir veya iki haftada bir) yakından birlikte hem hızlı hem de uzun vadede mükemmel sonuçlar verir.



OMNILUX revive™



Omnilux revive™ hücresel aktiviteyi uyandır. Hücresel aktivite arttıkça hücreler eksojen faktörlere daha geçirgen ve duyarlı hale gelir. Kan akışı artar, daha büyük doku oksijenlenmesine ve detoksifikasyona yol açar. Cilt daha az ince çizgiyle daha net görünür, erimiş ve nemlendirilir.

Aktif cilt bakım ürünlerinin etkisi büyük ölçüde artırılabilir.



Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, hastaların% 91'i tek başına Omnilux™ kullanırken ciltlerinde bir iyileşme bildirdi

Klinik Etkinlik

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, hastaların% 91'i tek başına Omnilux™ kullanırken ciltlerinde bir iyileşme bildirmiştir. % 60'ın üzerinde ince çizgilerin ve kırışıklıkların ve daha yumuşak pürüzsüz bir cildin yumuşamasını bildirdi. Hastaların% 55'i 9 tedaviden sonra cilt sıkılığını artırdı. Esneklikte de bir gelişme görülmüştür.


Omnilux revive™ birincil cilt gençleştirme için ve yara iyileşmesi, sedef hastalığı ve periorbital kırışıklıkların azaltılması için Omnilux plus™ ile birlikte kullanılabilir. Melanom dışı deri kanserleri ve şiddetli akne tedavisinde Photo Dynamic Therapy (PDT) 'de kullanılabilir. Hafif ila orta derecede akne vulgaris ve kistik akne için Omnilux blue™ ile birlikte kullanılır.

Aktif cilt bakım ürünlerinin etkisi büyük ölçüde artırılabilir.

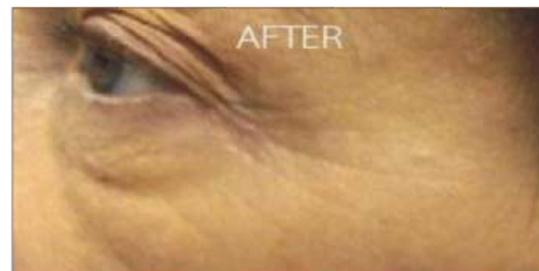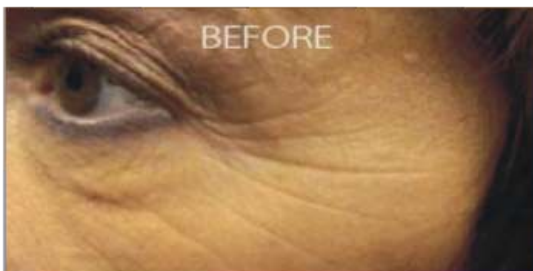

OMNILUX revive™

Çıkış yoğunluğu	105 mW / cm ²
Çıkış dalga boyu	633 +/- 6nm
Standart doz	126 J / cm ²
Tedavi süresi (standart doz)	20 dakika
Doz aralığı (ayarlanabilir)	1-150 J / cm ²
Bant genişliği	20nm +/- 3 nm
Ağırlık	12kg
Birim boyutları (HxWxD)	370 x 180 x 490 mm
Genel kafa boyutları (LxW)	320 mm x 280 mm
LED kafa aktif boyutları (LxW)	150 mm x 280 mm

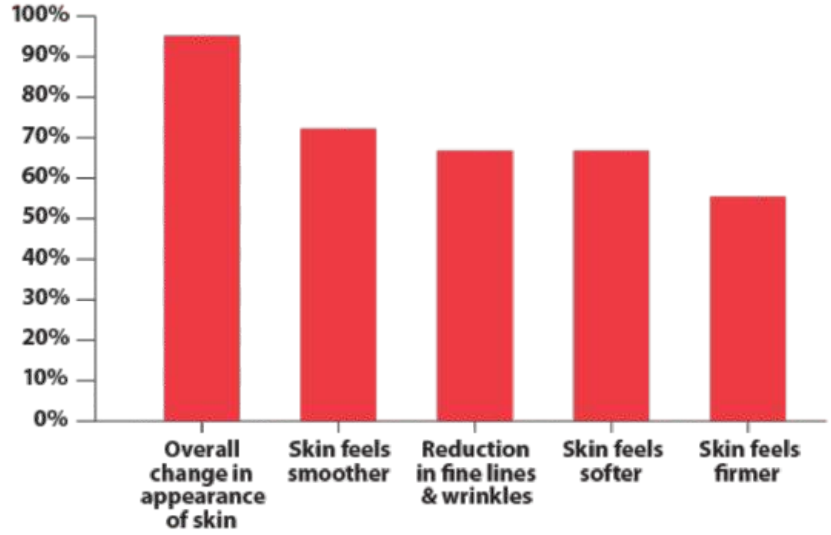

* Cilt Gençleştirmeinde Omnilux revive™ Yüz Tedavisinin Etkinliğini Belirlemek için Tek Körü Randomize Kontrollü Bir Çalışma. Dr Dr Bhat, Dr. Sean Lanigan, Dr Colin Whitehurst ve Jan Birch adına. Lazer bakım klinikleri, Birmingham, İngiltere. (Tıp Bilimlerinde Lazerler (Springer) Temmuz 2005, Cilt 20 Sayı 1)

OMNILUX plus™



OMNILUX plus™

Cilt gençleştirme

Omnilux plus™ ile birlikte Omnilux revive™, daha derin cilt dokusunu uyarır ve ince çizgilerin yumuşatılmasına, gelişmiş cilt tonuna ve süper pürüzsüz bir cilde neden olur.

Ayrıca enjektabl, kimyasal peeling ve diğer popüler estetik tedavilerle başarılı bir şekilde kullanılabilir.

Farklı ışıklar, cildin destekleyici yapılarının sentez ve onarımından sorumlu olan spesifik hücreleri hedefler. Kompozit etki, cildi daha dolgun ve görünüm olarak daha sıkı bırakır.

Daha derin cilt dokusunu uyarır, ince çizgilerin yumuşatılmasına, gelişmiş cilt tonuna ve süper pürüzsüz bir cilde neden olur.



Çıkış yoğunluğu	55 mW / cm ² Çıkış dalga boyu
Çıkış dalga boyu	830 +/- 5nm
Standart doz	66 J / cm ²
Tedavi süresi (standart doz)	20 dakika
Doz aralığı (ayarlanabilir)	1-180 J / cm ²
Bant genişliği	30nm +/- 5 nm
Ağırlık	12kg
Birim boyutları (HxWxD)	370 x 180 x 490 mm
Genel kafa boyutları (LxW)	315 mm x 350 mm
LED kafa aktif boyutları (LxW)	150 mm x 350 mm

OMNILUX blue™



Akne

Akne, dünyanın en yaygın cilt rahatsızlıklarından biridir ve tıkanıklık, bakteriyel kolonizasyon ve yağ foliküllerinin iltihaplanması sonucu oluşur.

Propionibacterium acnes veya P.acnes inflamasyonu için sorumlu olan temel bakterilerden biri, farklı dalga boylarında ışığa duyarlı olan porfirinler adı verilen doğal kimyasallar üretir.

Uyarıldığında bu kimyasallar bakterileri nötralize eder. Bakteri bulunmadığında iltihap yanar. Dahası, sebase bezler üzerindeki ışığın etkisi, P. acnes büyümesi için engelleyici bir ortam oluşturur.

* Etkili ve ağrısız

* Yağ bezine zarar vermez

* Anticomedonal preparat ile kombine edildiğinde görülen maksimum verimlilik.

Omnilux blue™, hafif ve orta şiddette akne vulgaris için hafif bir tedavidir. % 89 * iltihaplı sivilce azalması

Klinik Etkinlik

Yakın zaman önce yapılan bir GCP / ICH çalışmasında, her bireyin önemli ölçüde başarılı bir tedavi yanıtı vardı. Enflamatuvar lezyonlarda, 8 ile 16 hafta arasında (tedaviden 4 ila 8 hafta sonra)% 73 oranında optimum bir azalma oldu.


Omnilux blue™, hafif ve orta derecede akne vulgaris için hafif tedavi, iltihaplı akne lezyonlarında% 89 * azalma olduğunu gösterir (tedavinin bitiminden 4 hafta sonra).

Omnilux blue™, Omnilux revive™ PDT ile birlikte hafif ve orta derecede akne ve kistik akne tedavisinde kullanılabilir .



Çıkış yoğunluğu	40 mW / cm ²
Çıkış dalga boyu	415 +/- 5nm
Standart doz	48 J / cm ²
Tedavi süresi (standart doz)	20 dakika
Doz aralığı (ayarlanabilir)	1-150 J / cm ²
Bant genişliği	22nm +/- 3 nm
Ağırlık	12kg
Birim boyutları (HxWxD)	370 x 180 x 490 mm
Genel kafa boyutları (LxW)	315 mm x 350 mm
LED kafa aktif boyutları (LxW)	150 mm x 350 mm

OMNILUX blue™

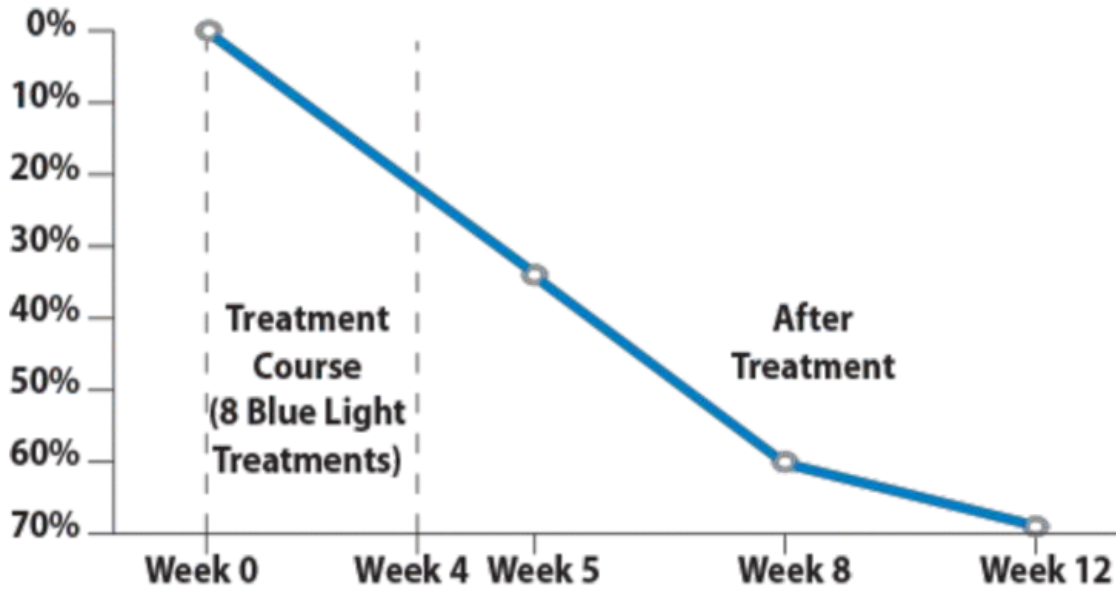

Morton CA, Scholefield RD, Whitehurst C ve Birch J. Hafif ve orta derecede akne tedavisinde mavi ışığın etkinliğini belirlemeye yönelik açık bir çalışma.

Dermatolojik Tedavi Dergisi. 2005; 16: 219-223

Bazı klinik çalışmalar

* A study to determine the efficacy of a novel handheld light-emitting diode device in the treatment of photoaged skin. Sadick NS, et al. J Cosmet Dermatol. 2008

Full text

* The use of light-emitting diode therapy in the treatment of photoaged skin.

Clinical trial

Baez F, et al. J Cosmet Dermatol. 2007

Full text

* A study to determine the efficacy of combination LED light therapy (633 nm and 830 nm) in facial skin rejuvenation.

Clinical trial

Russell BA, et al. J Cosmet Laser Ther. 2005

Full text

* A single-blinded randomised controlled study to determine the efficacy of Omnilux Revive facial treatment in skin rejuvenation.

Randomized controlled trial

Bhat J, et al. Lasers Med Sci. 2005

**Güzellik
En
Yakınıınızda**



CICU-f

Gelişen lazer teknolojisi ile akne izi, gözenekler, yara izi, yanık izleri, doğum çatlakları, yüz ve boyun kırışıklıklarının tedavisinde 15 DAKİKADA ÇÖZÜM

CICU f İLE 15 DAKİKADA

Uygulanan alana göre değişen fakat ortalama olarak 15 dakika uygulama süresi olan CICU – f lazer sonrası ciltte, ani olarak cilt altı kollagen liflerinde yüzde 30 oranında kısalma meydana geliyor. Sonraki 3 aylık dönemde, cilt altında yeni kollagen oluşumu ve cilt altı bağ dokusunun yeniden yapılanması sağlanıyor. Tüm bunların sonucunda cilt gençleşmesi olarak adlandırılan; ciltte gerilme cilt üzerindeki pürüzlerde, lekelerde, izlerde, yüksek seviyede azalma ve gözeneklerde daralmasına yardımcı olur.

Cicu f Co2 Uygulama Alanları

- İnce kırışıklıkların giderilmesinde
- Derin kırışıklık ve çizgilerin giderilmesinde
- Cilt gençleştirmede
- İz tedavilerinde
- Ciltte oluşan akne izleri
- Gözenekler ve çukurlar
- Su çiçeği izleri
- Yara ve yanık izleri
- Çatlaklar
- Ciltte oluşmuş güneş, yaşlılık, doğum sonrası lekelerinin ve yüzeysel pigment bozukluklarının giderilmesinde yardımcı olur.

Cerrahi Başlıklar

Fraskiyonel Başlık F50



Normal Başlık F100



Mafsallı kol



Ana Ünite

Lazer tip	: RF CO2 Laser, AH metal sealed type
Lazer güç	: 3DW
Bekleme zaman aralığı	: 20 - 5,00Dus
Tekrar oranı	: 0,2 - 1sec / Single
Tekrar geçiş (derece)	: 1-10th

Tedavi modu	: Mod 1(360°)
	: Mod 2(90°)

Mesafe	: 1 -2,Dmm
Tedavi alanı	: 1 X1 - 20 X 20mm
Püsel miktarı	: Upto4D, 401
Piksel ebat	: <100 micron
Soğutma	: Hava soğutma

Vajinal Tedavi Cihazı

Tedavi uzunluğu	: 10 ~ 80mm(10mm step)
Noktasal	: 1 ~ 2.5mm(0.5mm step)

CICU VR



Vajen Sıkılaştırma & Yenileme

Stres üriner inkontinans (SUI) & vajen sıkılaştırma, yenilemede tam otomatik vajinal tedavi cihazı.

CICU - VR ile ameliyatsız idrar kaçırma (SUI) tedavisi, vajinal daraltma, menopozda genitoüriner sendrom (GSM) tedavileri, genital beyazlatma, dış genital gençleştirme ve sıkılaştırma, labioplasti ve daha birçok jinekolojik uygulamalar yapılabilmektedir.

CICU - VR, ameliyatsız 15 dk gibi kısa bir zamanda uygulama imkanı sağlayan, çeşitli kadın hastalıklarına yönelik ayakta bakım tedavi yöntemidir. Uygulama hızlı, ağrsız, anesteziye etkili ve güvenlidir. CICU-VR CO2 hekimlere birçok farklı kadın hastalıklarında çabuk ve etkili olarak tedavi imkanı veren çok yönlü bir çözüm yöntemidir. İşlemler 15 dk. gibi kısa zamanda ayakta tedavi ortamında uygulanmakta ve anestezi veya günlük hayatın duraksamasına ihtiyaç duyulmamakta ve böylece kadınların günlük hayatlarına devam etmeleri, kendilerine olan güveni yeniden kazanmaları uygulamanın hemen ardından mümkün olmaktadır.

Avantajları

- Tam otomatik rotasyon (15 dk.)
- İnvazif – cerrahi operasyon gerektirmez
- Kısa sürede acısız tedavi
- Vajen kas dirayetini güçlendirir ve elastikiyeti artırır
- Vajen duvarını yeniler ve sıkılaştırır
- Over üriner inkontinans kontrol sistemini geliştirir
- Konvensiyonel cerrahi yöntemine göre gözle görülür farklar sağlanmasına yardımcı olur.

Endikasyon

- Stres üriner (SUI)
- Vajen sıkılaştırma
- Vajen kuruluk
- Genital beyazlatma
- Diğer jinekolojik uygulamalar

Ana Ünite


Lazer tip	: RF CO2 Laser, AH metal sealed type
Lazer güç	: 3DW
Bekleme zaman aralığı	: 20 - 5,00Dus
Tekrar oranı	: 0,2 - 1sec / Single
Tekrar geçiş (derece)	: 1-10th

Tedavi modu	: Mod 1(360°)
	: Mod 2(90°)

Mesafe	: 1 -2,0mm
Tedavi alanı	: 1 X1 - 20 X 20mm
Püsel miktar	: Upto4D, 401
Piksel ebat	: <100 micron
Soğutma	: Hava soğutma

Vajinal Tedavi Cihazı

Tedavi uzunluğu	: 10 ~ 80mm(10mm step)
Noktasal	: 1 ~ 2.5mm(0.5mm step)

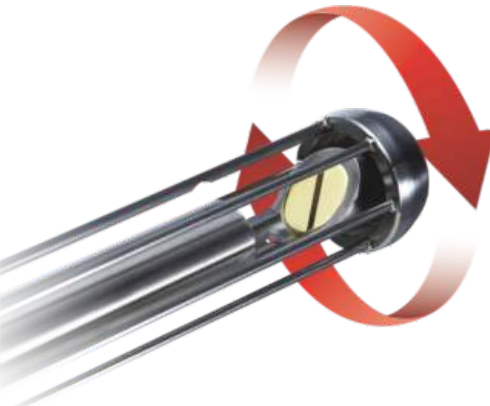

ULTHERA MD



ULTHERA MD (HIFU)

Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason (HIFU)

Ulthera MD, lazer teknolojilerinin çözemediği sadece cerrahi operasyonlar ile başarılabilen yüz germe operasyonunu enjeksiyonsuz iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmadan, risksiz çözebilen yepyeni bir teknolojidir. Ultherapy sisteminde kullanılan "Deepsea" adı verilen teknoloji de "Focuslu Ultrason" ile cildin alt tabakalarında sıcak noktalar yaratır. Bu sayede, cilt kendi onarım sürecini oluşturarak yeni kolajen üretimine başlar. Uygulamanın hemen ardından toparlanmaya başlayan cilt istenen görünümüne 60 gün sonunda ulaşır. Tek bir uygulamanın ardından elde edilen sonuç, 12 ay boyunca muhafaza edilir.

Uygulama Alanları

- Alın, göz, ağız etrafındaki kırışıklıklar
- Her iki yanak cildinin kaldırılması ve sıkılaştırılması
- Cildin elastikiyetinin artırılması
- Alın deri dokusunu sıkılaştırır, kaş hatlarını kaldırır
- Boyun yaşlanması ve kırışıklıkların giderilmesi

Teknik Özellikler

Teknoloji: HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason)

Güç: 150 W

Voltaj: 110-240 V, 50/60 Hz

Atış sayısı: 10000 / Her Başlık

Başlık Kafa Sayısı: 5

Enerji Tipi: HIFU 4 MHz & 7 MHz

Mesafe: 1.0-4.0 mm (0.1 mm kademe)

Uzunluk: 10-25 mm (1.0 mm kademe)

Enerji çıkışı: 1.0-2.5 J/cm² (0.1 J kademe)

Derinlik: 3 mm, 4 mm, 8 mm, 13 mm E1.5/1.5 mm



CRYO micro rf

Altın İğne RF



Matrix Sistem Fraksiyonel RF

Termal RF ve Cooling RF

Cryo Mikro altın iğne başlığı cilde temas ettirildiğinde mikro iğneler otomatik olarak ayarlanan derinlikte cilt içerisine ani bir giriş yapar.

Çok sayıdaki altın uçlu mikro iğnelerle cilt üstünde fraksiyonel mikro delikler oluşturur ve sadece iğne ucundan gönderilen cilt üstüne temas etmeyen radyo frekans ile dermiste kollajen ve elastin üretimi tetiklenirken, epidermis ve yüzeysel cilt tabakalarına potansiyel termal hasar verilmez.

Amaç verilebilecek en yüksek enerjileri deriye bir zarar vermeden doğrudan cilt altına ulaştırmaktır.

UYGULAMA ALANLARI

Altın İğne hem yüz hem vücut için uygundur

- İnce kırışıklıkların giderilmesinde,
- Vücuttaki sarkmaların toparlanmasında,
- Cilt gençleştirmede,
- Siville izleri, çukurluklar ve yara izlerinin giderilmesinde,
- Yanık izleri tedavisinde,
- Gözaltı morluklarının tedavisinde,
- Hamilelik çatlaklarında,
- Gözenek sıkılaştırmada,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış Gücü: 1000W
Ekran: 10.4" (inch) renkli dokunmatik ekran
Dil: İngilizce
Ölçüler: 59 x 35 x 112 cm
Ağırlık: 40 Kg
Paket: Alüminyum kutu

PICOSECOND



Q SWITCH ND-YAG LAZER

Picosecond lazer, melanini büyük bir basınçla vurmak için ultra kısa (saniyenin 1 trilyonu) kullanır ve melanini küçük toz benzeri parçacıklara dönüştürür. Parçacıklar çok küçük olduğu için, vücut tarafından emilir ve elimine edilir. Her türlü pigmenti ve dövme yi etkili ve güvenli bir şekilde kaldırır.

Avantajlar

- 1) Yüksek Teknoloji: Mystic Dawn lazer makinesi, bir cilt oluşturmak için benzersiz petek odaklı teknoloji kullandı. Tedavi sırasında cildin hasara karşı koruyabilme etkisi.
- 2) Kolay Epilasyon: 1064nm ve 532nm, 755nm farklı basın tarafından enerjiler arası otomatik geçiş yapabilirsiniz.
- 3) Hızlı ve Etkili: Mystic Dawn lazer makinesi dövme pigmenti vakalarda işlemi 3/1 azaltılmış olup, hızlı bir şekilde tedavi ve iyileşme süresi sağlamıştır.
- 4) Melanin Çökelti Yok: Vücut postoperatif şişlik, melanin çökeltme fenomenini önemli ölçüde azaltacaktır.


Uygulama Alanları

Tüm renk dövme, eyeline ve lipline kaldırma
Epidermis ve dermis pigmenti
Oto nevus, mavi nevus, siyah nevus, kahve lekesi
Senil plaklar, çil, güneş yanığı ve kloazma
Cilt beyazlatma ve kırışıklık kaldırma vb.

Teknik Özellikler

- Güç:** 2000W
Dalga Boyu: 1064nm, 532 nm, 755 nm
Frekans: 1-10 Hz
Süre: Dynamic light 700 ps
Lazer Modu: Multi mod
Soğutma Sistemi: Hava soğutma + Su Soğutma Cooling
Soğutma Sıvısı: Arıtılmış su
Volt: 220 V 50 Hz/ 110V 60 Hz
Ağırlık: NW: 106.6 kg GW: 164.6 kg
Enerji Kararlılığı: 3% @ 1064nm/ 532 nm
Enerji: 1064Q @ 200MJ-1300MJ, step 200MJ
532 @ 100MJ-650MJ, step 100MJ
Başlık: Orijinal ithal başlık verimliliği %90,
Nokta büyüklüğü 2-10 ayarlanabilir
Cihaz Ölçüleri: Makine ölçüleri: 980x350x880 mm
Paket Ölçüleri: 1120x475x1020 mm

Melanin lazer enerjisini emer

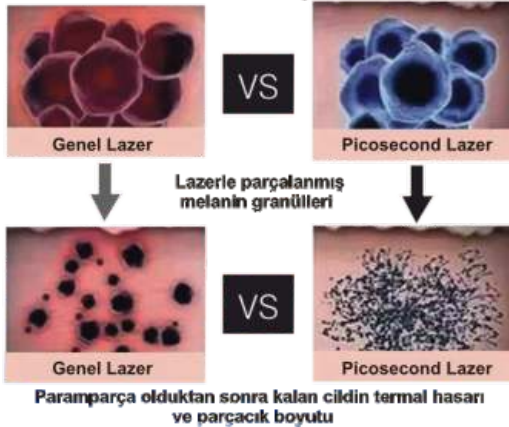

Kılcal Damarlarınız
Artık Sizi Üzmez

VARISON-MD



980 nm diode lazer penetre üzerine fiber bir çıkış sağlayarak cilde nüfuz eder ve hedef doku hemoglobin tarafından emilir ve termal koagülasyon üretilir. Koagüle olan hemoglobin damar üzerinde bir duvar örerek, hasarlı doku ortadan kaybolacaktır.

Uygulama Alanları

- ✓ Telenjektazi ve Hemanjiom
- ✓ Vasküler Lezyonlar
- ✓ Kırmızı Kan Damarları



Teknik Özellikler

Lazer Tipi	Diode Lazer
Dalga Boyu	980 NM
Voltaj	AC 100-240 V 50 / 60 Hz
Power	80 W
Lazer Power	15 W
Frekans	1-20 Hz
Çalışma Şekli	Sürekli ve Darbeli
Nokta Boyutu	1.4 mm, 1.9 mm, 2.4 mm
Gösterge	635 NM İnfrared Ray

Dione Diode

Çalışma Prensibi

808 nm diyot lazer makinesi epilasyon için altın standarttır, ışık ve ısının seçici dinamiklerine dayanır; lazer kıl foliküllerinin köküne ulaşmak için cilt yüzeyinden geçer, ışık tercihen kılın melanini tarafından emilebilir ve daha sonra ısı hasarlı saç folikülü dokusuna dönüştürebilir, böylece doku çevresindeki yaralanmadan saç dökülmesi rejenerasyonu.

Lazer çıktısı verildiğinde, özel soğutma teknoloji cildi soğutur ve cildin zarar görmesini önler ve çok güvenli ve rahat bir tedaviye ulaşır.

IPL makinesi veya diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, 808 nm diyot lazer makinesi tedavisi güvenli, ağrısız ve kalıcı.

Uygulama Alanları


- Kalıcı olarak dudak kılı, sakal kılı, göğüs kılı, koltuk altı kılı, bikini hattı vb.
- Bronzlaşmış cilt de dahil olmak üzere tüm ciltler için uygundur.
- Ağrısız ve kılısız rahat tedavi.
- Her çeşit ve her renkteki tüm kılları hızlı yok eder.
- Cilt gençleştirme.

Teknik Özellikler

Lazer Tipi: Diyot LAzer
Lazer Dalga Boyu: 808 nm
Ekran: 115 renkli dokunmatik LCD ekran
Çıkış Gücü: 2500W
Spot Boyutu: 12x 16 mm²
Darbe Genişliği: 8-685 ms ayarlanabilir.
Enerji: 2-120 J/Cm² ayarlanabilir
Frekans: 1-10 Hz
Soğutma: Su + Hava+ Semiconductor
Prob Sıcaklığı: 0 ~ -5 derece
Ölçüler: 63 x 63 x 124 cm
Net Ağırlık: 51.5 kg
Brüt Ağırlığı: 79 kg
Volt: AC 110V / 60 Hz, AC 220V / 50 Hz
Paket: Alüminyum kasa



Hüresel hedef kırmızı ve kızılötesi dalga boyunda

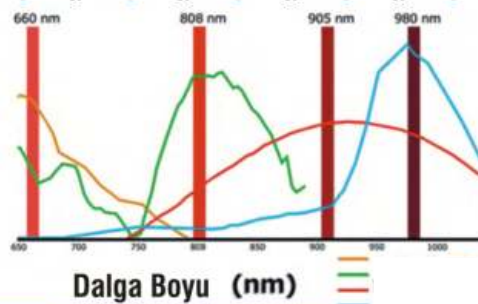

Alex-Pro SHR

ÇİFT BUZ BAŞLIK



Cihaz Özellikleri

Alex Pro SHR IPL teknolojisinde sınırlarını aşan saniyede 10 atım yapabilen hızlı modu sayesinde çalışma süresini azaltarak zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Geleneksel lazer ve IPL teknolojilerine göre çok daha hızlı atım yaparak etkili sonuçlar elde eder. Fransız Chiller soğutma teknolojisini içinde barındıran ALEX-PRO Buz Başlıklı yaz kış hava sıcaklığı ne olursa olsun kesintisiz ve üstün bir soğutma sunarak tedavi sürecini acısız ve daha konforlu hale getirmiştir. 1 Milyon atım ömrü olan başlıklar ile maliyeti olumlu şekilde etkilemiştir. Çift başlık oluşu ile kullanımda büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Teknik Özellikler

Çift Buz Başlık SHR

Işık Sistemi: Intel Pulse Light System

Atış Sıklığı: 1/10 Hz

Nm Aralığı: 640-1200 Nm

Spot Başlık Özellikleri: 42 x 14 x 38 mm

Ekran: 8.4 Touch Ekran

Power / Güç: 1600 V

Soğutma Özellikleri: Su, Yan İletken ve Kontak Soğutma

Soğutma Derecesi: Chiller -20oC + 0oC

Enerji: 70 J/Cm2

Voltaj: 220 V, 10 A, 50/60 Hz

Acısız,
Ağrısız,
Ayva Tüylerde
Etkili

Batık Kılılarda
Etkili Çözüm
Sunar

Son Teknoloji
(OPT Sistem)
İle 4 Mevsim
Uygulama

Alex-Pro SHR

BUZ BAŞLIK



Cihaz Özellikleri

ALEX-PRO sıradan cihazların aksine teknolojiyi ve teorileri tamamı ile birleştiren eşsiz H-plus teknolojisi ile yeniliğe bir kere daha öncülük etmiştir. Bu eşsiz teknoloji ve ışığın benzersiz kombinasyonu ile chiller soğutma sistemi ihtiyaç duyulan maksimum enerjinin verilebilmesini sağlayarak cilde zarar vermeden güvenli ve etkili tedavi imkânı sağlar.

ALEX-PRO tüm cilt tipleri fark edilmeksizin chiller soğutma teknolojisi sayesinde yanma riski olmadan yaz aylarında dahi tedavi imkânı sunar.

ALEX-PRO Chiller soğutma teknolojisi suyu dünyada en etkili soğutabilen sistemdir.

Alex-Pro batık kıllarda ve kıl dönmelerinde etkilidir

Cilt enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalık riski yoktur

Saniyede 10 Hz' lik atım

Tıbbi açıdan güvenli

-50 °C Özel Kullan-at Başlık

Teknik Özellikler

Tek Buz Başlık SHR

Işık Sistemi: Intel Pulse Light System

Atış Sıklığı: 1/10 Hz

Nm Aralığı: 640-1200 Nm

Spot Başlık Özellikleri: 42 x 14 x 38 mm

Ekran: 8.4 Touch Ekran

Power / Güç: 1600 V

Soğutma Özellikleri: Su, Yarı İletken ve Kontak Soğutma

Soğutma Derecesi: Chiller -20oC + 0oC

Enerji: 70 J/Cm²

Voltaj: 220 V, 10 A, 50/60 Hz

Acısız,
Ağrısız,
Ayva Tüylerde
Etkili

Batık Kıllarda
Etkili Çözüm
Sunar

Son Teknoloji
(OPT Sistem)
İle 4 Mevsim
Uygulama

Alex-Pro SHÜ & SHR

**SOĞUK HAVA ÜFLEMELİ
VE BUZ BAŞLIK**



Cihaz Özellikleri

ALEX-PRO sıradan cihazların aksine teknolojiyi ve teorileri tamamı ile birleştiren eşsiz bir teknoloji sunmuştur.H-Plus ve OPT teknolojisi kullanılan cihazlarımız yeniliğe bir kere daha öncülük etmiştir.Bu eşsiz teknoloji ve ışığın benzersiz kombinasyonu ile chiller soğutma sistemi ihtiyaç duyulan maksimum enerjinin verilebilmesini sağlayarak cilde zarar vermeden güvenli ve etkili tedavi imkânı sunar.

- +22 °C' lik ortam ısısında konforlu uygulama imkânı sağlar.
- Jilet ve jel gerektirmez.
- Tüm cilt tiplerinde 4 mevsim uygulama imkânı.
- Müşteriye özel kullan-at başlığıyla hijyen ve konfor sağlar.
- Batık kıllarda ve kıl dönmelerinde etkilidir.
- Buz başlık olarak kesintisiz soğutma imkânı sunar.
- Cilt enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalık riski yoktur.

Teknik Özellikler

Işık Sistemi: Intel Pulse Light System

Atış Sıklığı: 1/3 Hz, 1/10 Hz, 1/3 Hz

Nm Aralığı: 640-1200 Nm

Spot Başlık Özellikleri: 46 x 16.5 x 35 mm , 42 x 14 x 38 mm

Ekran: 8.4 Touch Ekran

Power / Güç: 2400 W

Soğutma Özellikleri: Su , Hava , Yarı İletken ve Kontak Soğutma

Soğutma Derecesi: Chiller -50oC +0oC

Enerji: 70 J/Cm²

Voltaj: 220 V, 15 A, 50/60 Hz

**Acısız,
Ağrısız,
Ayva Tüylerde
Etkili**

**Batık Kılılarda
Etkili Çözüm
Sunar**

**Son Teknoloji
(OPT Sistem)
İle 4 Mevsim
Uygulama**

Mystic Dawn+++ Cryolipolysis



Cihaz Özellikleri

Mystic Dawn Cryolipolysis

Yağ hücrelerini belirli bir derecede soğutarak diğer dokulara zarar vermeden vücuttan atılmasını sağlayan etkili bir sıkılaştırma ve şekillendirme yöntemidir.

Sadece 30 ile 60 dakikalık uygulamayla deri altındaki yağ hücrelerini dondurarak diğer dokulara zarar vermeden lenf yoluyla atılmasını sağlar. 1 ay arayla 3 seans tekrarı yapılır.

Bölgesel incelmede etkilidir.

Başlıklar üzerindeki ekran sayesinde kolay kullanım

İlk seanstan itibaren 3-8 cm incelme

Birikmiş yağların %20 ve %40'ında azalma

Selülit tedavisi

Teknik Özellikler

Seans Öncesi ve Sonrası



Çıkış Gücü : 1000w

Ekran : 10.4"(inch) renkli dokunmatik ekran

Dil : İngilizce

Ölçüler :59x35x12cm

Ağırlık :40kg

Paket : Alüminyum Kutu

Mystic Dawn+++

- **KAVİTASYON**
- **RF**



Vücut zayıflama, yüz şekillendirme, yağ çözme ve selülitlerde. Etki şekli Lenfatik drenajı etkisi ile metabolizmayı hızlandırır ve kan dolaşımını artırır. Ödem oluşmasını engelleyerek yağın tekrar birikmesini önler.

Rf sayesinde hedef dokuda dokularda yüksek frekanslı ısı sayesinde elektromanyetik enerjiyi artırır.

Yüksek frekanslı elektromanyetik enerji yağ hücrelerinin elektrik dengesini ve matriksini etkileyerek fizyolojik yer değişimi gerçekleşir böylece hedef dokularda hassas ve etkili sonuç alınmasına yardımcı olur.

Cihaz Özellikleri

- 1 - Vücut ve yüz bakımlarında kullanılabilir
- 2 - Dijital ekran
- 3 - Vücut şekillendirme ve bölgesel zayıflama
- 4 - Selülit giderme, yüz germe ve kırışıklık açma
- 5 - Tek gövdede vakum ünitesi, infrared ve radyo frekans
- 6 - Arka ve ön bacak, sırt, basen, karın ve kollar için uygulama başlıkları
- 7 - Cihaz hareket edebilen ve 360° dönebilen tekerlere sahiptir

Teknik Özellikler

Kavitasyon :40k
RF Frekans : 5Mhz
Vakum Gücü : 0-280 kpa
Güç : 530w
Çalışma Kolları :6 adet
Cihaz Boyutu : 115x51x61 cm
Ağırlık : 35Kg
Dil : İngilizce



G-5 Vibrasyonlu Masaj



Zayıflamak bu kadar kolay olmamıştı

Titreşimli ve Masajlı Zayıflama

Vibrasyonlu Masaj (G5 Sistem) , kan devir daiminin, lenf sisteminin ve metabolizmanın hızlanmasını tetikleyen geliştirilmiş bir terapi masaj sistemidir. Bu masaj sistemi ile selülit bağlarının kırılması sonucunda toksinleri atarak maksimum sonuçları elde edersiniz.

G5 Sistem 'in özellikleri

- Selülitlerde ve fazla yağlı bölgelerde etkili uygulama
- Göğüs ve karın sarkmalarını azaltma
- Stres, yorgunluk tedavisi
- Negatif enerji birikimlerini azaltma
- Adale spazmları ve sinirsel kasılmaların giderilmesi
- Adaleleri ısıtarak uygulama
- Kireçlenmelerde ve ayak ağrılarını hafifletmesi
- 8 Farklı başlık seçeneği

Teknik Özellikler

Voltaaj : 220-240V / 110-120V
Frekans : 50Hz-60Hz
Ağırlık : 11 Kg

HESTIA Beauty

CİLT BAKIM CİHAZI

Farklı özellikleri ile hak ettiğiniz güzelliği gözler önüne çıkaran yüz temizleme, masaj, cilt fırçalama, cilt temizleme, leke çıkartma, kullanılır. Cildin yağları ve siyah noktaları temizler.



Cihaz Özellikleri

- * Buhar
- * Ozon
- * Işıklı Büyüteç
- * Yüksek Frekans
- * Galvanik
- * Vakum
- * Sprey
- * Cilt Analiz
- * Frimatör
- * Lifting
- * İyontoferez
- * Elmas Uçlu Peeling
- * Sıcak Çekiç
- * Soğuk Çekiç
- * Lpg Metabolic Depres

AquaMagic

CİLT BAKIM CİHAZI

4 farklı çalışma modu



ÖZEL SOLÜSYONLARLA ÖZEL BAKIM

İşıltılı bir cilt için oksijen terapi cildi derinlemesine temizler, ölü deri ve kirlerden arındırır. Sağlıklı cilt rengini geri kazandırır, derinlemesine temizlik ve aydınlanma sağlar, sebumu dengeler ve her türlü cilt tipinde uygulanabilir.

Mikro dolaşımı teşvik eder, cildin canlandırılmasına yardımcı olur, kılcak damarların oksijen içeriğini artırarak kan dolaşımını hızlandırır. İçindeki aktif oksijen sayesinde cilt altında mikro kabarcıklar oluşturur böylece cildin yaşlanmasını engelleyerek, cildin anti-radikal etkisini yeniden kazandırır. Derinlemesine cilt bakımı ile, cildin beslenmesini, esnekliğini yeniden kazandırır.

4 farklı çalışma modu ve 4 ayrı başlık

Aqualpeeling - Oxygenfacial

Multipolar RF - Needle free injection

Aqualpeeling : Cildi derinlemesine temizler, ölü deri ve kirlerden arındırır, sağlıklı cilt rengini geri kazandırır. Derinlemesine temizlik ve aydınlanma sağlar, sebumu dengeler ve her türlü cilt tipinde uygulanabilir.

Oxygenfacial: Cilt yüzeyine uygulanan solüsyonların milyonlarca mikro kabarcıklar yöntemi ile cilt altına yedirilmesini ve cildin doğal iyileştirme mekanizmasının çalıştırılmasını sağlar.
Meo Bright Jel : Cildi aydınlatır, pigmentasyonu azaltır, cilt rengini eşitler, güneşten sonraki yan etkileri azaltır.
Meo Revive Jel : Cildi sıkılaştırır, Nemlendirir, Kırışıklıkları azaltır, cildi canlandırır.

Multipolar RF: Multi 4 polar RF, uygulaması ile cilt anında sıkılaştır daha genç ve daha canlı görünür. Kırışıklıkların görünümü hafifler düzenli kullanımda kırışıklıklar azalır.

Needle free injection : Cilt bakım ürünlerinin aktif içeriklerinin cilt altına iletilmesi hafif bir ısı üreterek cilt hücrelerinin metabolizmasını güçlendirir, dolaşımı hızlandırır, cilt nemini artırır .

Teknik Özellikler

Model	: 078-1A
Name	: Aqua Magic
	: Aqualpeeling
4 Handles	: Oxygenfacial
	: 4 polar RF
	: Needle free injection
Screen display	: 8 inch touch screen
Power	: 50VA
Machine dimention	: 47*40*105cm
Net weight	: 20 kg
Drive power	: 2000 W



Antalya | İstanbul | Ankara | İzmir

www.hestiaestetik.com

HESTIA

estetik-medikal

ANTALYA GENEL MÜDÜRLÜK

Öğretmenevleri Mah. Atatürk Bulv.
Şenkal İş Merkezi No:64 Kat: 2/4
Konyaaltı /ANTALYA
Tel: 0532 166 51 90
Tel: 0533 301 84 84
info@hestiaestetik.com
www.hestiaestetik.com

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretmenevleri Mah. Atatürk Bulv.
Şenkal İş Merkezi No:64 Kat: 2/4
Konyaaltı /ANTALYA
Tel: 0533 035 60 00
Tel: 0533 297 13 47
akdeniz@hestiaestetik.com

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0537 566 87 04
Tel: 0532 777 75 68
marmara@hestiaestetik.com

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0551 653 03 04
icanadolu@hestiaestetik.com



hestiaesteik



hestiaesteik